


ACCESSOIRES



ASPIRATION ACCESSOIRES

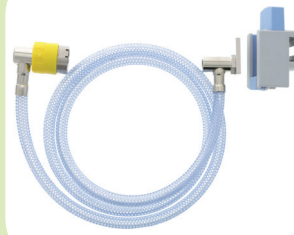

**TECHNOLOGIE
MÉDICALE**





**ASP01-F****Embout direct AFNOR TM CHOC**

Réf. 22161 : Embout direct AFNOR VIDE 12 x 100 M

ASP02-F**Embouts porte-tuyau AFNOR**

(Livrés avec cape de sertissage)

- a Réf. 22193 : Embout droit VIDE
- b Réf. 22200 : Embout équerre VIDE
- c Réf. 22194 : Embout droit VIDE pour tuyau 9/16"
- d Réf. 22201 : Embout équerre VIDE pour tuyau 9/16"

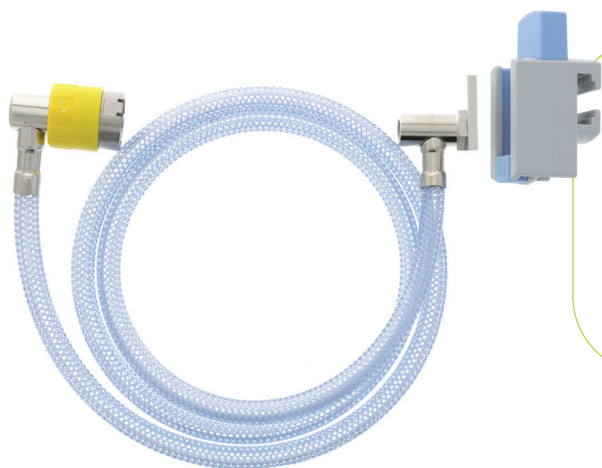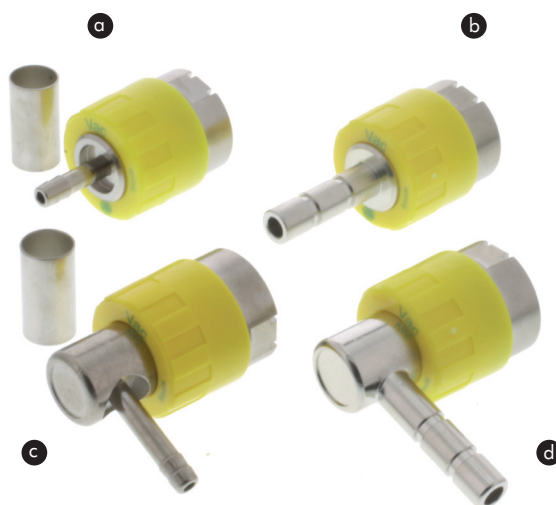**ASP03-F****Montage au rail AFNOR TM CHOC**

Montage au rail complet VIDE, avec embout équerre AFNOR TM CHOC serti, 1,5 m de tuyau antistatique, curseur en métal et griffe au rail en polycarbonate.

Réf. 16683

ASP04-F**Prise normalisée AFNOR 3/8G M**

Conforme à la norme NF S 90-116

Réf. 10032 : Prise rapide VIDE




DEDOUBLEUR DE PRISES AFNOR BLOCS PRISES AFNOR

Pour alimenter plusieurs dispositifs à partir d'une seule source de gaz :

ASP05-F

Dédoubleur de prises Y avec embout direct AFNOR

Réf. 10021 : Dédoubleur de prises VIDE

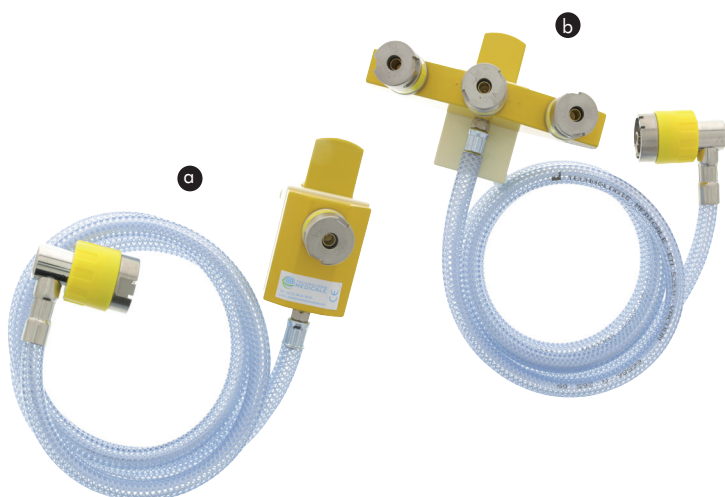

ASP06-F

Blocs prises au rail

Livrés avec montage au rail complet avec embout équerre AFNOR serti, 1,5 m de tuyau antistatique et attache universelle en métal.

- a Bloc prise simple
Réf. 15523 : VIDE
Bloc prise double
Réf. 15527 : VIDE
- b Bloc prise triple
Réf. 15538 : VIDE

ASP07-F

Vanne de vide

A utiliser pour réaliser une aspiration non régulée.
Deux positions : ouvert ou fermé.

Livrée en standard avec le flacon de sécurité 100 cc en polycarbonate, autoclavable à 134°C et incassable, muni d'une sécurité anti-débordement et d'un filtre antibactérien à usage unique en façade.

La Vanne de vide permet de protéger les prises murales contre toute remontée de liquide aspiré et donc d'éviter tout risque de contamination des canalisations de vide.

Réf. 11419 : Vanne de vide avec flacon de sécurité 100 cc (filtre antibactérien en façade) et embout direct AFNOR.



ASP08-F**Porte-sondes avec tubes en polycarbonate et griffe au rail universelle TM en polycarbonate**

- a Réf. 16595 : Porte-sondes complet 1 tube 40 cm
- Réf. 16596 : Porte-sondes complet 1 tube 50 cm
- b Réf. 16597 : Porte-sondes complet 2 tubes 40 cm
- Réf. 16598 : Porte-sondes complet 2 tubes 50 cm

**ASP09-F****Griffe universelle TM en polycarbonate**

Résistante aux chocs et **conforme à la norme européenne NF EN ISO 19054 (écartement de 30 mm)**.

La griffe universelle TM en polycarbonate permet de suspendre au rail tous les dispositifs de la gamme TECHNOLOGIE MEDICALE. Vous pourrez également suspendre tous les appareils répondant à la norme européenne NF EN 128 (patte de support plus large : 30 mm), en retirant simplement le petit adaptateur bleu logé dans la partie inférieure de la griffe en le faisant coulisser vers le haut.

Réf. 11949


ASP10-F

Griffe en aluminium rilsanisé avec plaquette de support pour suspension au rail des appareils TM.

- a Réf. 15657

Plaquette de support en aluminium pour fixation murale des dispositifs TM.

- b Réf. 10313

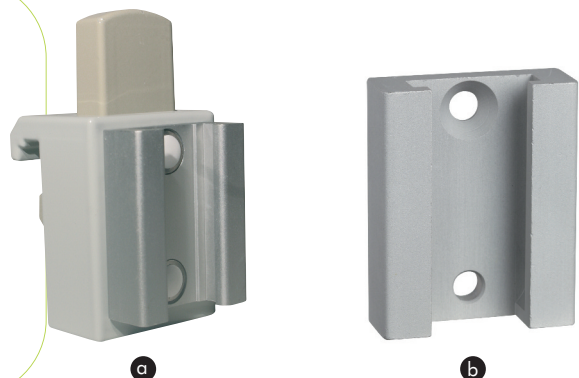

VALVES D'ARRET DU VIDE

Système permettant de bloquer manuellement l'aspiration.

A raccorder entre une sonde d'aspiration et l'extrémité du tuyau d'aspiration relié au bocal de recueil.

ASP11-F

Stop vide

Pour obtenir l'aspiration, obstruer le trou central par une simple pression du pouce.

- Dispositif à usage unique.
- Modèle à membrane.
- Versions adulte et pédiatrique.
- Support intégré fixe.
- Contrôlé à 100 %.
- Fiable.
- Ergonomique.
- Silencieux.
- Fourni non stérile*

Commande minimum : 100 pièces.

Stop vide à membrane avec support intégré.

Ⓐ Réf. 16613 : modèle adulte

Ⓑ Réf. 16616 : modèle pédiatrique



ASP12-F

Contrôle-vide (brevet déposé)

Pour obtenir l'aspiration, exercer une pression du pouce sur le bouton.

- Dispositif à usage unique.
- Modèle à piston.
- Système progressif permettant de contrôler plus finement l'aspiration
- Versions adulte et pédiatrique.
- Avec ou sans crochet pivotant.
- Contrôlé à 100 %.
- Fiable.
- Ergonomique.
- Silencieux.
- Fourni non stérile*

Commande minimum : 100 pièces.



* Possibilité de stérilisation par quantité.

ASP13-F

Suceur à usage unique pour drainage.

Commande minimum : 100 pièces.

Réf. 16607



ASP14-F


Tuyau d'aspiration autoclavable en silicone

Conditionnement : Rouleaux de 25 mètres.

Commande minimum : 25 mètres.

Réf. 16916 : 7x13 mm pour bocal 1 l. et 2 l.

Réf. 16917 : 8x14 mm pour bocal 4 l.

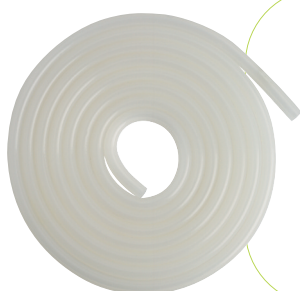



Aussi disponible / Also available



Distribué par / Distributed by

**SUCTION
ACCESSORIES**



**TECHNOLOGIE
MEDICALE**

101, rue Vaillant Couturier - 93136 NOISY-LE-SEC CEDEX - FRANCE
Tél. : 33 (0)1 48 45 58 95 - Fax : 33 (0)1 49 42 90 21 - 33 (0)1 48 45 29 00 - info@technologiemedicale.com
www.technologiemedicale.com