


# ACCESSOIRES



## ASPIRATION ACCESSOIRES

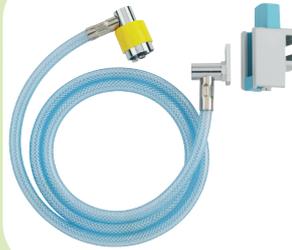

**TECHNOLOGIE  
MÉDICALE**





## ASP01

### Embout direct AFNOR

Réf. 10146 : Embout direct AFNOR VIDE 12x100 M

## ASP02

### Embouts porte-tuyau AFNOR

(Livrés avec cape de sertissage)

- a Réf. 10115 : Embout droit VIDE
- b Réf. 10129 : Embout équerre VIDE
- c Réf. 10105 : Embout équerre VIDE pour tuyau 9/16"


a



b



c

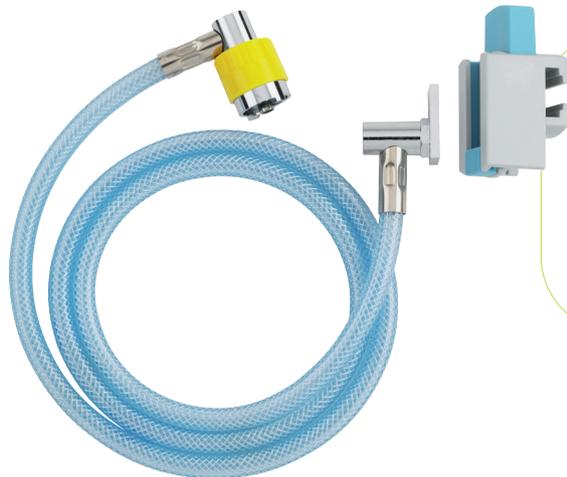

## ASP03

### Montage au rail AFNOR

Montage au rail complet VIDE, avec embout équerre AFNOR serti, 1,5 m de tuyau antistatique, curseur en métal et griffe au rail en polycarbonate.

Réf. 16683

## ASP04

### Prise normalisée AFNOR 3/8G M

Conforme à la norme NF S 90-116 : 1988.

Réf. 10032 : Prise rapide VIDE




## DEDOUBLEUR DE PRISES AFNOR BLOCS PRISES AFNOR

Pour alimenter plusieurs dispositifs à partir d'une seule source de gaz :

### ASP05

#### Dédoubleur de prises Y avec embout direct AFNOR

Réf. 10021 : Dédoubleur de prises VIDE

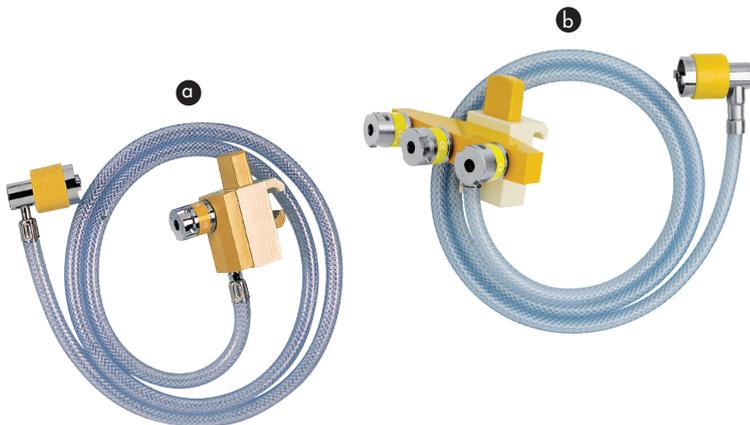

### ASP06

#### Blocs prises au rail

Livrés avec montage au rail complet avec embout équerre AFNOR serti, 1,5 m de tuyau antistatique et attache universelle en métal.

- a) Bloc prise simple  
Réf. 15523 : VIDE  
Bloc prise double  
Réf. 15527 : VIDE
- b) Bloc prise triple  
Réf. 15538 : VIDE

### ASP07

#### Vanne de vide

A utiliser pour réaliser une aspiration non régulée.  
Deux positions : ouvert ou fermé.

Livrée en standard avec le flacon de sécurité 100 cc en polycarbonate, autoclavable à 134°C et incassable, muni d'une sécurité anti-débordement et d'un filtre antibactérien à usage unique en façade.

La Vanne de vide permet de protéger les prises murales contre toute remontée de liquide aspiré et donc d'éviter tout risque de contamination des canalisations de vide.

Réf. 11419 : Vanne de vide avec flacon de sécurité 100 cc (filtre antibactérien en façade) et embout direct AFNOR.



**ASP08****Porte-sondes avec tubes en polycarbonate et griffe au rail universelle TM en polycarbonate**

- a) Réf. 16595: Porte-sondes complet 1 tube 40 cm
- Réf. 16596: Porte-sondes complet 1 tube 50 cm
- b) Réf. 16597: Porte-sondes complet 2 tubes 40 cm
- Réf. 16598: Porte-sondes complet 2 tubes 50 cm

**ASP09****Griffe universelle TM en polycarbonate**

Résistante aux chocs et conforme à la norme européenne NF EN ISO 19054 : 2006 (écartement de 30 mm).

La griffe universelle TM en polycarbonate permet de suspendre au rail tous les dispositifs de la gamme TECHNOLOGIE MEDICALE. Vous pourrez également suspendre tous les appareils répondant à la norme européenne NF EN 128 (patte de support plus large : 30 mm), en retirant simplement le petit adaptateur bleu logé dans la partie inférieure de la griffe en le faisant coulisser vers le haut.

Réf. 11949


**ASP10**

Griffe en aluminium rilsanisé avec plaquette de support pour suspension au rail des appareils TM.

- a) Réf. 15657

Plaquette de support en aluminium pour fixation murale des dispositifs TM.

- b) Réf. 10313

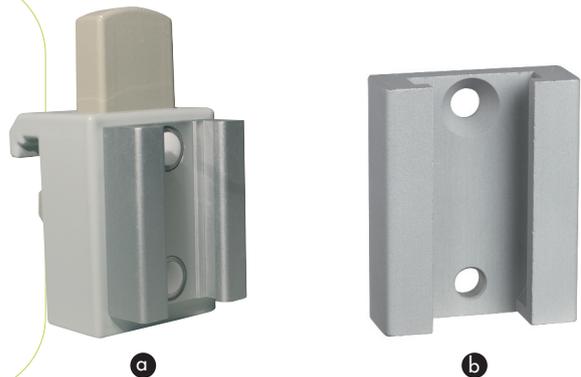

## VALVES D'ARRET DU VIDE

Système permettant de bloquer manuellement l'aspiration.

A raccorder entre une sonde d'aspiration et l'extrémité du tuyau d'aspiration relié au bocal de recueil.

### ASP11

#### Stop vide

Pour obtenir l'aspiration, obstruer le trou central par une simple pression du pouce.

- Dispositif à usage unique.
- Modèle à membrane.
- Versions adulte et pédiatrique.
- Support intégré fixe.
- Contrôlé à 100%.
- Fiable.
- Ergonomique.
- Silencieux.
- Fourni non stérile\*

Commande minimum : 100 pièces.

Stop vide à membrane avec support intégré.

**a** Réf. 16613 : modèle adulte

**b** Réf. 16616 : modèle pédiatrique



### ASP12

#### Contrôle-vide (brevet déposé)

Pour obtenir l'aspiration, exercer une pression du pouce sur le bouton.

- Dispositif à usage unique.
- Modèle à piston.
- Système progressif permettant de contrôler plus finement l'aspiration
- Versions adulte et pédiatrique.
- Avec ou sans crochet pivotant.
- Contrôlé à 100%.
- Fiable.
- Ergonomique.
- Silencieux.
- Fourni non stérile\*

Commande minimum : 100 pièces.



\* Possibilité de stérilisation par quantité.

### ASP13

Suceur à usage unique pour drainage.

Commande minimum : 100 pièces.

Réf. 16607



### ASP14

#### Tuyau d'aspiration autoclavable en silicone

Conditionnement : Rouleaux de 25 mètres.


Commande minimum : 25 mètres.

Réf. 16916 : 7x13 mm pour bocaux 1 l. et 2 l.

Réf. 16917 : 8x14 mm pour bocaux 4 l.



**Aussi disponible**

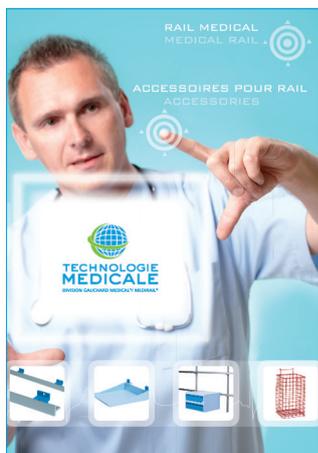

**Distribué par**

**ASPIRATION  
ACCESSOIRES**



**TECHNOLOGIE  
MEDICALE**

101, rue Vaillant Couturier B.P. 46 F-93136 NOISY-LE-SEC CEDEX France  
 Tel: 33 (0)1 48 45 58 95 - Fax: 33 (0)1 49 42 90 21 - 33 (0)1 48 45 29 00 - info@technologiemedicale.com  
 www.technologiemedicale.com